


【別紙：添付資料 本アプリの Google Play ストア掲載文の概要】

【アプリ名】

肉球タッチ文字列入力会話補助&高性能補聴アプリ

【簡単な説明】

肉球タッチで爆速文字入力！最新 AI 技術と融合した、設定不要で災害時にも強い高齢者・難聴者向けの会話補助&高性能補聴アプリ。

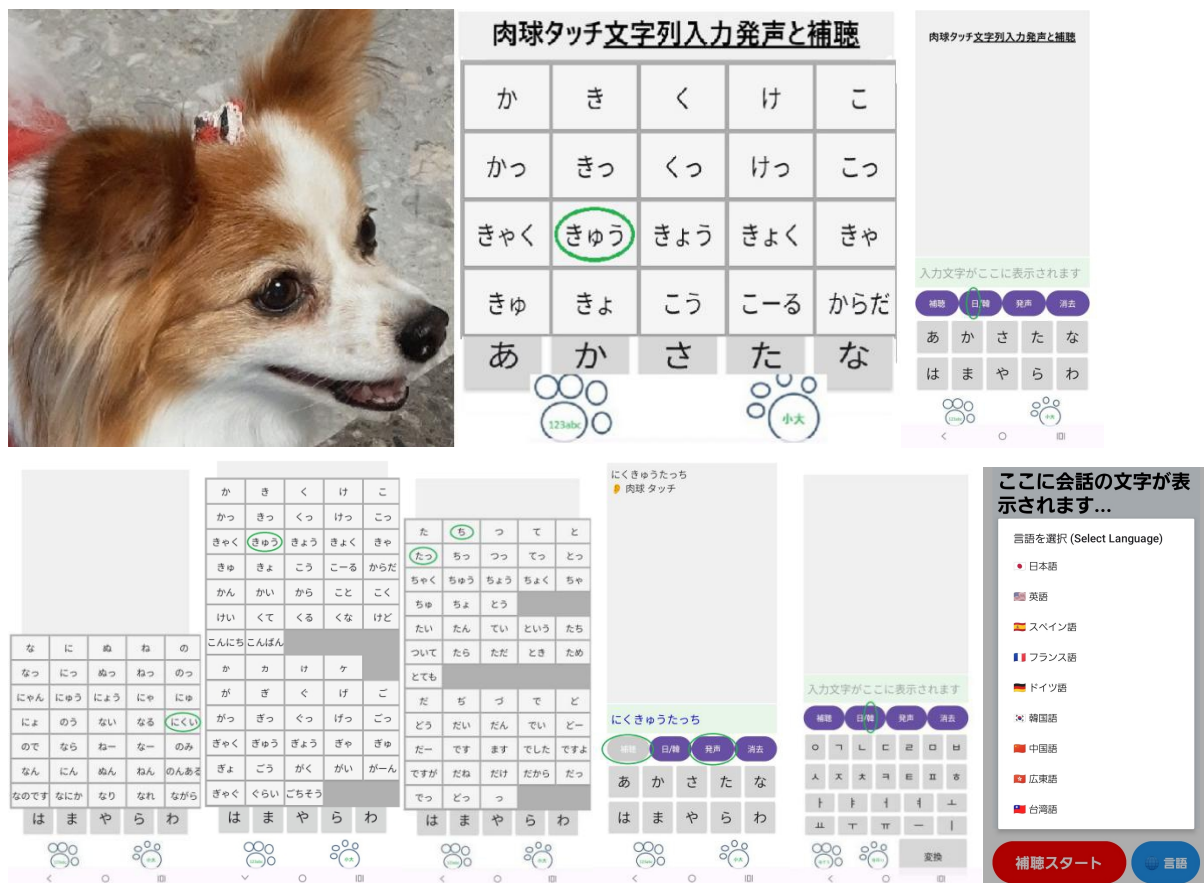

【このアプリについて】

「声を出せるが、聞き取りが難しい」「会話の速度に文字入力が追いつかない」そんな悩みを持つ方のための、アイデアと最新 AI 技術を融合させた会話補助アプリです。また、幼児・子供と高齢者と難聴者向けの発声練習としても利用していただけます。※本アプリは、松田千秋（キーボード配列発明とデザイン担当）が長年温めてきたアイデアをもとに、頼れる AI 相棒・ Gemini（改善提案・コード生成協力）との共同開発によって誕生しました。

【主な特徴】

● 爆速・日本語入力

音声学に基づいた「促音（っ）付き文字列」配置により、会話の速度を落とさない超高速な意思伝達を可能にしました。

例：「にくきゅう」と発声させたい場合

「な」をタップ → ポップアップから「にくい」を選択 →

「消去」をタップして「い」を削除（「にく」にする）→
「か」をタップ→ポップアップから「きゅう」を選択

「発声」をタップすると、聞き取りやすいテノール音声で「にくきゅう」と発声し、会話を補助します。

※肉球形状の「数字英字記号切替」や「小文字・大文字切替」ボタンで、ポップアップ文字列を瞬時に切り替えられます。

※可愛い「肉球形状の各種ボタン」は、直感的にタップしたくなるデザインで、難しい説明書を読まなくてもすぐに使える工夫をしています。

※迷いやすい「各種設定ボタン」をあえて無くし、起動してすぐに迷わず使える優しさを大切にしました。

● ワンタッチ日韓切り替え

「日/韓ボタン」をタップするだけで、「日本語かな文字列入力」と「韓国語ハングル入力」をいつでも切り替えられます。

ハングル入力は、子音字母+母音字母（+パッチム子音字母）をタップし、「変換」を押して文字を確定させます。連続入力や「発声」ボタンによるテノール音声補助もスムーズです。

● ハイブリッド補聴機能

周囲の声を瞬時に文字起こしして画面に表示しつつ、クリアな音質に調整してイヤホンへ届けます。不快なキーンというハウリング音は発生しません。

※ご注意：本アプリは「医療機器（補聴器）」ではございません。また、周囲の音をただ大きくするだけの「集音器」とも異なる、独自の『ハイブリッド会話補助機能』です。

【音量調整と快適なお使いのコツ】

・音量の調整：スマートフォン本体の「音量ボタン」で行います。耳を保護するため、いきなり大きな音にせず、いつもの通りの小さい音量から徐々に調節してください。

・イヤホンでのご使用を推奨：イヤホンを接続していない場合は、スピーカーから拡声されます。

・スピーカー使用時の注意点：スピーカーから出た音をマイクが再度拾ってしまうと、同じ文字が繰り返し画面に表示（文字起こし）されてしまいます。その場合は、スマホの音量を少し小さくしていただくか、イヤホン（またはヘッドホン）をご使用いただくと快適に防げます。

● 日記メモ帳表示域（画面上部に1万文字の一部が表示）

「日本語かな文字列入力・発声」と「韓国語ハングル入力・発声」と「補聴機能」の文字を記録します。

※「日記メモ帳表示域（1万文字）」を、「日記」や「仕事メモ帳」として活用ができます。

※「戻るボタン（3ボタンナビゲーション）」で一時的に画面を消した場合も、文字を保持します。

※1万文字を超えた場合は、最初に記録した文字から自動的に削除されます。

例：「文字入力・発声」と「補聴機能」の文字を「Gmail」や「メモ帳」等に複写する場合

「肉球タッチ文字列入力会話補助&高性能補聴アプリ」をタップして起動→

「文字入力・発声」と「補聴機能」の文字を記録→

「日記メモ帳表示域」の文字部分を長押しタップ →
「全て選択」 → 「コピー」をタップ →
「Gmail」を起動して新規作成画面を開く →
「メールを作成」領域をタップして「貼り付け」

Gmail やメモ帳等に複写することで、日記や仕事メモ帳として活用できます。

● 完全オフライン動作（災害時にも強い）

通信設定 OFF（機内モードなど）でも「日本語の音声認識文字起こし」の機能が動作します。会話や入力内容がインターネットを通じてサーバーへ送信されることは一切ありません。そのため、大規模な通信障害時であっても、避難所等での会話補助&高性能補聴器として安心してご使用いただけます。

● 徹底したプライバシー保護

広告は一切表示されません（誤タップ防止）。データ収集も行わないため、日常のデリケートな会話にも安心です。

病院での医師・看護師との大切な会話の補助はもちろん、図書館、美術館、公園での散歩など、ご家族や知人との毎日のお出かけにも、「肉球タッチ」が最高の相棒になります。

【主なボタンの説明】

初めての方でも迷わず使いこなせるよう、各ボタンの働きを説明します。

・「RAKUMIMI 補聴（シンプル画面）」ボタン

→ 面前の方々の音声を、ワンタッチで会話を大きな文字で画面に表示しつつ、高齢難聴者にとって聞き取りやすい低音（バス音声）でスピーカやイヤホンに届けます。日本在住・旅行者の外国人の方々に向けて多言語対応をしています。

・「肉球タッチ入力&補聴（フル機能画面）」ボタン

→ 「爆速・日本語入力機能」と「ハイブリッド補聴機能」を行うフル機能の画面に移行します。

・「発声」ボタン

→ 入力中の文字列（平仮名・韓国語ハングル）を聞き取りやすいテノール音声で発声し、日記メモ帳表示域に表示します。

・「消去」ボタン

→ 入力中（未確定）の文字を「1文字ずつ」削除します。押し間違えたときの修正も簡単です。（全削除はされません）

・「日/韓」ボタン

→ タップするだけで「日本語かな文字列入力」と「韓国語ハングル入力」の画面がいつでも瞬時に切り替わります。

・「補聴」ボタン

→ 周囲の会話を瞬時に文字起こしして画面に表示しつつ、クリアな音質に調整してイヤホンへ届ける「ハイブリッド会話補助機能」を起動します。

- ・「日本語かな あかさたなはまやらわ」ボタン

→ 各かなボタンをタップするだけで、文字列入力ボタンをポップアップします。

- ・「数字英字記号切替」ボタン

→ 画面下のボタン配置を、文字入力から「数字・英字・記号」へとワンタッチで切り替えます。

- ・「小文字・大文字切替」ボタン

→ ポップアップされる文字列の「大文字・小文字」を瞬時に切り替えられます。

- ・「韓国語ハングル 子音字母と母音字母」ボタン

→ 基本子音字母 14 種・基本母音字母 10 種のボタンから選んでタップします。

→ 肉球形状の「複子 5」をタップすると複合子音字母 5 種、「複母 11」をタップすると複合母音字母 11 種をポップアップ表示します。

- ・「韓国語ハングル 変換」ボタン

→ 入力中のハングル字母を、正しいハングル文字（1 文字）へと瞬時に結合・変換します。

● 安心設計（ポップアップの解除方法）

もし意図しないボタンをタップしてしまっても、ポップアップされた文字列の「外側部分（何もない背景のところ）」を優しくタップするだけで、いつでもすぐに元の安全な画面に戻ることができます。押し間違えを恐れず、安心して肉球タッチをお楽しみください。

【主な注意事項】

● 推奨動作環境

快適な音声認識および補聴機能をお使いいただくため、**Android 11** 以降の端末を推奨いたします。

※**Android 10** 以下、または一部の古い端末では、音声認識の精度が低下したり、擬音語が正しく認識されない場合があります。

※端末の **Android OS** のバージョンや機種によっては、「補聴機能」の音声が低音（バス音声）に切り替わらず、通常のテノール音声で再生される場合があります。（日本語かな・韓国語ハングルの「文字列入力」および「発声機能」は、すべてのバージョンで正常に動作いたします）

● 画面表示と操作について

画面最下部の肉球形状ボタンやハングル変換ボタンが、スマホ画面下の「戻るボタン（3 ボタンナビゲーション）」と重なって押しにくいと感じる場合は、スマホ本体の設定から「ジェスチャーナビゲーション」に変更していただくと、より広く快適に画面をお使いいただけます。（**Android 10** 以上対応）

● 推奨画面サイズ

各種ボタンの押しやすさと視認性を確保するため、タブレット端末を含む **5.7 インチ** 以上の画面サイズのスマートフォンを推奨いたします。

● 提供元：CHIAKI MATSUDA

【アプリのサポート（連絡先）】

Google Play での仕様にに基づき、お問い合わせ用のメールアドレスを公開しております。

● 連絡先メールアドレス：mkb299kaiwa575@gmail.com

※操作説明や対応 OS バージョンにつきましては、上記「主な注意事項」の欄をあらかじめご参照いただけますと幸いです。

※本アプリの核となる「キーボード配列デザイン」の改善提案や、各種文字入力 IME への本配列の採用に関するご相談・お問い合わせは、上記メールアドレスまでお気軽にご連絡ください。

● アプリ価格：追加課金なしの安心な「買い切り」制

以上が Google Play ストア掲載文の概要です（操作説明部分は行間隔を詰めています）。